


Brugervejledning til IVISKIN LED-maske

IVISKIN

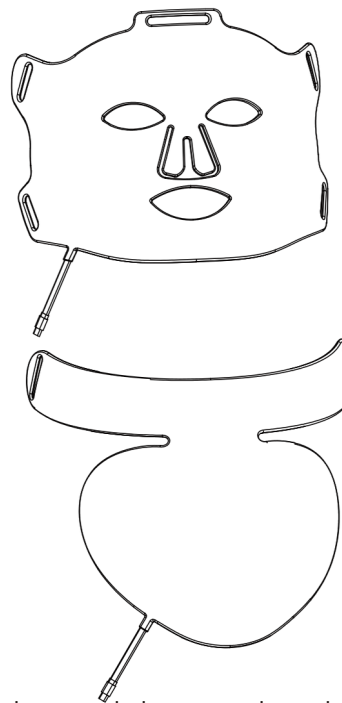

*Før du bruger dette produkt for første gang, bedes du læse brugervejledningen omhyggeligt.
Husk at beholde den, i tilfælde af, at du får brug den i fremtiden.

Brugervejledning

Produktbeskrivelse	1
Forskellige tilstande	2
Funktioner	2
Fjernbetjening	3
Før du starter	3
Hvordan den bruges	3
Forholdsregler	4
Sikkerhed	4

Produktbeskrivelse

Iviskins LED-maske er designet til at give dig det bedste inden for hudfornyelse og skønhedspleje. Maskens overfladestruktur er lavet af medicinsk silikonemateriale, som er både sikkert og nemt at bruge. Masken er bærbar og kan fastgøres med et justerbart spænde, så den passer til forskellige ansigtsformer, samtidig med at den også er velegnet til alle hudtyper og kan bruges af personer med forskellige hudplejebehov. Hvis du derudover har brystmasken, er det samme information som ansigtsmasken. Samlet er der i alt 186 højkvalitets LED-lys.. Hvert LED-lys udsender 4 forskellige bølgelængder (blåt lys 415nm, gult lys 590nm, rødt lys 660nm og nær-infrarødt lys 850nm). Masken kan justeres via kontrolenheden til at udsende 3 forskellige energiniveauer.

Iviskins LED-maske udfører lysterapi og virker ved at trænge ind i huden, hvor lysene stimulerer kollagen og elastin til at danne celler. På denne måde opnås effekten af hudfornyelse. Enheden har 6 tilstande, hvor alle tilstande har en standardtid på 10 minutter.



Fjernbetjening



Øjenbeskyttelse i silikone



Rejseetui



Kabel USB-C



Justerbart spænde



Brugervejledning

Tilstande

M1
Reparation

M2
Fornylelse

M3
Anti-aging

M4
Morgenpleje

M5
Anti-akne

M6
Aftenpleje

Funktioner

6 tilstande

M1: Reparation 660nm ■

M2: Fornylelse 590+660nm ■ ■

M3: Anti-aging 660+850nm ■ ■

M4: Morgenpleje 590+660+850nm ■ ■ ■

M5: Anti-akne 415nm ■

M6: Aftenpleje 590+660+850+415nm ■ ■ ■ ■



Gult lys

Afbalancerer hudens tekstur, stimulerer røde blodlegemer, reducerer rødme, hævelse og fine linjer



Rødt lys

Anti-aging, fremmer kollagen, opstrammer og øger elasticiteten



Infrarødt lys

Reparerer huden, forbedrer blodcirkulationen og fugter huden




Blått lys

Steriliserer aknefremkaldende bakterier, reducerer inflammation og ør, og øger ilttilførselen til huden

Tips

- Sørg for at oplade maskens batteri helt før brug. Opladningstiden er cirka 3 timer.
- Det øverste dæksel er udstyret med et justerbart spænde, der gør det muligt at bære masken komfortabelt.
- Når du skal tage masken på, skal du føre remmen gennem indgangshullet på den modsatte side af masken, føre remmen rundt om hovedet og sætte den godt fast.

Fjernbetjening

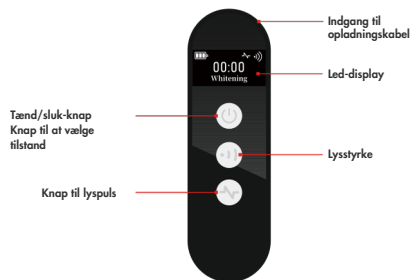


Før du starter

1. Fjern støvbeskyttelsesfilmen

2. Tag øjenbeskyttelsen på (silikonbeskyttelse)

3. Fastgør det justerbare spænde

4. Tilslut strøm og fjernbetjening

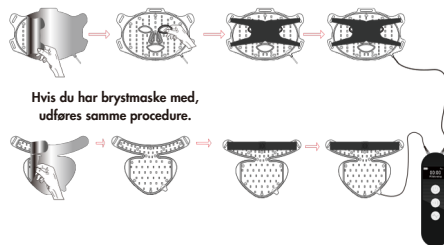

Hvordan bruges den bruges

- Tænd/sluk-knappen: Tryk og hold den nede i ca. 3 sekunder for at tænde for enheden. Når enheden er tændt, begynder den at lyse.
- Knap til valg af lysstyrke: Tryk hurtigt for at justere og skifte. De energitilstande, du kan vælge imellem: 50%, 75%, 100%.
- Tidtagning: Standardtiden for hver tilstand er 10 minutter, når tilstanden er valgt.
- Valg af tilstand: Tryk på tænd/sluk-knappen, når du har tændt for lyset. Der er 6 tilstande, du kan vælge imellem.
- Valg af puls: Du kan trykke på pulsknappen i hver tilstand.

Produktspecifikationer

Produkt navn	IVISKIN LED-lysterapi ansigtsmaske		
Spænding	5V / 2A	Batterikapacitet	5000mAh
Strøm	< 3.5A	Arbejdseffekt	< 15W
Ansigtssdel	310*207*4.5 mm	Nakkedel	350*260*4.5mm
LED Quantity	Ansigt: 122 LED-lys / Nakke: 64 LED-lys	Belgelængder	415nm:590m:660n:850 1:1:1:1

Forholdsregler

BEMÆRK: BRUG IKKE DETTE PRODUKT, HVIS DU ER EN AF FØLGENDE PERSONER:

1. Personer som er gravide, planlægger graviditet, eller ammer.
2. Personer med lysfølsomhed eller som tager medicin, der kan forårsage lysfølsomhed.
3. Personer med arvelige øjensygdomme (f.eks. lupus erythematosus, lysfølsomt eksem, albinisme, osv.)

Test af lysfølsomhed

Trin 1: Placer enheden på din arm, og tænd på kontakten for bestråle i ca. 10 minutter. Hvis du oplever symptomer som rødme eller kløe, kan det tyde på, at du har lysfølsom hud, og det anbefales at du holder op med at bruge LED-masken, eller taler med din læge, før du bruger den igen.

Trin 2: Før brug, bedes du rengøre dit ansigt og holde det tørt (uden makeup) for at undgå, at lysfølsomme ingredienser i kosmetik påvirker effektiviteten af din hudpleje.

Trin 3: Efter brug kan huden blive rød, hvilket er en normal hudreaktion. Den vil vende tilbage til sin normale tilstand inden for 1-2 timer. Hvis du føler svie eller andet ubehag under processen, bedes du straks stoppe med at bruge den.

Sikkerhed

1. Følg venligst den korrekte metode til brug af dette produkt. Brug ikke udstyret uden for instruktionerne. Brug uden for instruktionerne kan resultere i maskinejl eller uventede bivirkninger.
2. Brug ikke dette produkt til at forbedre andre forhold end dem, der er angivet.
3. Gravide kvinder, ammende kvinder og børn bør ikke bruge dette produkt.
4. Hvis brugeren har fysiske eller sensoriske helbredsproblemer, eller er under behandling for hudsygdomme (f.eks. lupus erythematosus, lysfølsomt eksem eller albinisme), anbefales det ikke at bruge dette produkt. Hvis det er nødvendigt at bruge produktet, skal det ske under opsyn af kvalificeret personale, f.eks. en hudlæge eller anden medicinsk ansvarlig.
5. Hvis brugeren lider af nogen form for lysfølsomhedsforstyrrelse (fotosensitivitet), må dette produkt ikke anvendes.
6. Må ikke anvendes samme dag som hudplejeprodukter som indeholder lysfølsomme ingredienser. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: AHA- og BHA-syrer, retinol, tretinoin, citrusolier og antibiotika.
7. Vær opmærksom på at beskytte dine øjne under brug. Brug korrekt øjenbeskyttelse, og det anbefales at lukke øjnene under brug. Hvis du har en genetisk øjensygdom, må du ikke bruge masken.
8. Hvis du oplever ubehag under brug, skal du straks stoppe med at bruge produktet.
9. Dette produkt er ikke vandtæt. Nedsænk ikke udstyret i vand, og skyl det ikke med vand. Hvis du har mistanke om, at det har været i kontakt med vand, må du ikke bruge det.
10. Opbevares utilgængeligt for børn.
11. Hvis nogen dele er beskadiget, må du ikke bruge produktet.
12. Dette produkt er kun til daglig brug. Det må ikke skilles ad, ændres eller repareres det uden autorisation.
13. Det anbefales at bruge dette produkt 3-4 gange om ugen, med en enkelt påføringstid på 10-20 minutter.